

CUSTOMER : SAGAMI BATU GAJAH	FINISHING : FOLDING	COLOUR: ■ RED	DATE : 30-7-2022
DESCRIPTION : RFSU SENSITIVE IFU (UES332U4002)		■ BLACK	MOULD NO:
MEASUREMENT: OPEN: 200 mm x 130 mm CLOSE: 50 mm x 130 mm			BLOCK NO:
B/QUALITY : 60 gsm simili			


FRONT



SENSITIVE

ALMOST
NAKED
NON LATEX

BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
KÄYTTÖOHJE

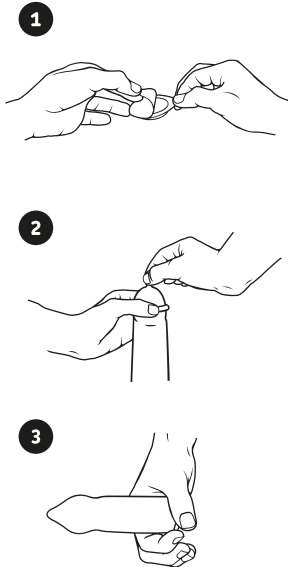

S BRUKSANVISNING

1. Öppna förpackningen som teckningen visar. Använd inga skarpa föremål. Rulla först upp kondomen en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall rullas på.
2. Kläm behållaren mellan tumme och pekfinger för att få bort luft. Före nära kontakt med din partner, dra tillbaka förhuden och rulla på kondomen försiktigt så den inte rispar av naglarna.
3. Direkt efter utlösning dras penis långsamt ut, var noga med att se till att kondomen hålls på plats så att ingen sperma rinner ut.

N BRUKSANVISNING

1. Pakningen öppnas som vist på teckningen. Bruk ingen skarp gjenstander. Rull først ut kondomet et stykke, slik at det tydelig vises hvilken vei det skal ruller på.
2. Klem luften ut av kondomet, med tommel og pekefinger. Trekk forhuden tilbake og rull på kondomet, før det etableres fysisk kontakt med partneren. Unngå å rispe kondomet med neglene eller andre gjenstander.
3. Rett etter utløsning skal penis trekkes langsomt ut. Sørg for at kondomet holdes på plass, slik at det ikke renner noe sæd ut.

Återanvändning av kondomen ökar risken för att kondomen kan spricka eller glida av. /Gjenbruk /Genanvedning av kondomet öker risikoen fra at kondomet sprekker eller glir av. /Kondomin uudelleen käyttäminen lisää rikkoutumisen riskiä ja vaikeuttaa kondomin paikallaan pysymistä.

DK BRUGERVEJLEDNING

1. Emballagen åbnes som vist på tegningen. Anvend ikke nogen skarpe genstande. Rul kondomet en smule ud, så man tydeligt ser, hvilken vej det skal rulles på.
2. Klem luften ud af kondomets reservoir, med tommel- og pege-finger. Træk forhuden tilbage og rul kondomet på den erigerede penis, før der etableres fysisk kontakt med partneren. Undgå at rive kondomet på negle eller andre genstande.
3. Direkte efter udløsning skal penis trækkes langsomt ud. Sørg for kondomet holdes på plads, så der ikke rinder noget sæd ud.

FI KÄYTTÖOHJE

1. Avaa pakkaus piirroksen mukaisesti, älä käytä teräviä esineitä. Pyritä kondomia hieman auki nähdäksesi, että se tulee oikeinpäin.
2. Purista peukalolla ja etusormella ilma kondomin kärjestä. Vedä esinahka taakse ja pyritä kondomi paikoilleen ennen intiimiä ihokosketusta. Varo raapimasta kondomia kynsillä.
3. Vedä penis hitaasti ulos heti siemensyöksyn jälkeen samalla varmistaen, että kondomi pysyy paikoillaan eikä spermaa pääse valumaan ulos

Använd kondomen endast en gång/
Kondomet må kun bruges en gang/
Kondomet må ikke genanvendes/
Käytä kutakin kondomia vain kerran.



BACK

S

Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. När du använder extra glidmedel ska det vara vatten- eller silikonbaserat, RFSU har ett brett sortiment att utgå ifrån. Använd inte oljebaserade varianter som t ex barnolja eller vaselin.

Använd inte en kondom från en skadad förpackning. Om kondomen går sönder kontakta läkare eller rådfråga på apotek inom 72 tim.

När du köper RFSUs produkter bidrar du till arbetet med sexualupplysning och mänskliga rättigheter i Norden och stora delar av världen. Inget preventivmedel är 100% säkert.

Rådfråga läkare eller apotek innan kondom används med salva eller vagitorier för medicinerig.

N

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot både uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Hvis du bruker ekstra glidemiddel skal det være vann- eller silikonbasert. RFSU har et bredt utvalg glidemidler å velge fra. Ikke bruk oljebasert glidemiddel som f.eks babyolje eller vaselin.

Bruk aldri et kondom fra en skadet pakning. Hvis kondomet går i stykker under samleie, skal du kontakte din lege eller rådføre deg med et apotek innen 72 timer.

Når du kjøper RFSUs produkter bidrar du til arbeidet med seksualopplysning og menneskerettigheter i Norden og i store deler av verden. Ingen prevensjonsmiddel er 100% sikre.

Spør din lege eller på apoteket hvorvidt kondomer kan benyttes sammen med salva eller vagitorier.

DK

Kondomet er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod både graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Når du bruger glidecreme, skal den være vandbaseret eller silikonebaseret, RFSU har et bredt udvalg at vælge imellem. Brug ikke oliebaseerede glidecremer som f.eks. babyolie, vaseline el. lign.

Anvend aldrig en kondom fra en skadet pakning. Hvis kondomet går i stykker under samleje, skal du kontakte din læge eller rådfører dig hos apoteket inden 72 timer.

Når du køber RFSUs produkter bidrager du til arbejdet med seksualoplysning og menneskelige rettigheder i Norden og store dele af verden. Intet præventionsmiddel er 100% sikkert.

Spørg din læge eller apoteket til råds om, hvorvidt kondomer må anvendes sammen med salve eller vagitorier (indføring af kapsel i skeden).











FI

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaaa sekä ei-toivotulta raskaudelta että sukupuoliteitse tarttuuilta taudeilta. Kun käytät liukuvoidetta, on sen oltava vesi- tai silikonipohjaista. RFSU:n laajasta valikoimasta löydät useita erilaisia liukuvoiteita. Älä käytä öljypohjaisia aineita kuten vaseliinia, hoito- tai hierontajäilyä tai ihovoidetta.

Älä käytä kondomia jos pakkaus on vahingoittunut. Jos kondomi rikkoutuu, ota yhteys lääkäriin tai kysy neuvoa apteekkihenkilökunnalta 72 tunnin kuluessa.

Ostaessasi RFSU:n tuotteita tuet seksuaalivalistus- ja ihmisoikeustyötä Pohjoismaissa ja muualla maailmassa. Yksikään ehkäisyväline ei takaa 100% varmuutta.

Älä käytä kondomia lääkehoitoon tarkoitettujen voiteiden tai emätinpuikkojen kanssa. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

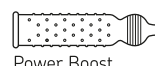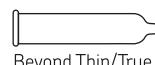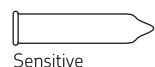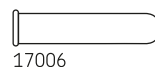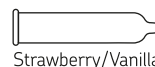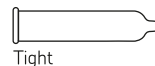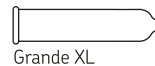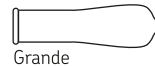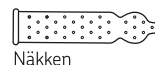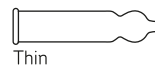

BY BUYING THIS PRODUCT YOU ARE SUPPORTING RFSU'S WORK WITH SEXUALITY EDUCATION AND HUMAN RIGHTS IN THE WORLD.

Importer:
RFSU AB,
Box 1279,
Färögatan 33,
164 29 Kista
Sweden

Distributor/Jakelija:
RFSU Norge AS, Oslo
Conaxess Trade Denmark, København
Suomen RFSU Oy, Helsinki
www.rfsu.com



Originated and developed by **! SAGAMI** Tokyo, Japan

See all of RFSU's products at www.rfsu.com

07 2022 ver no 2
UES332U4002